


RF美颜器

RF Beauty equipment

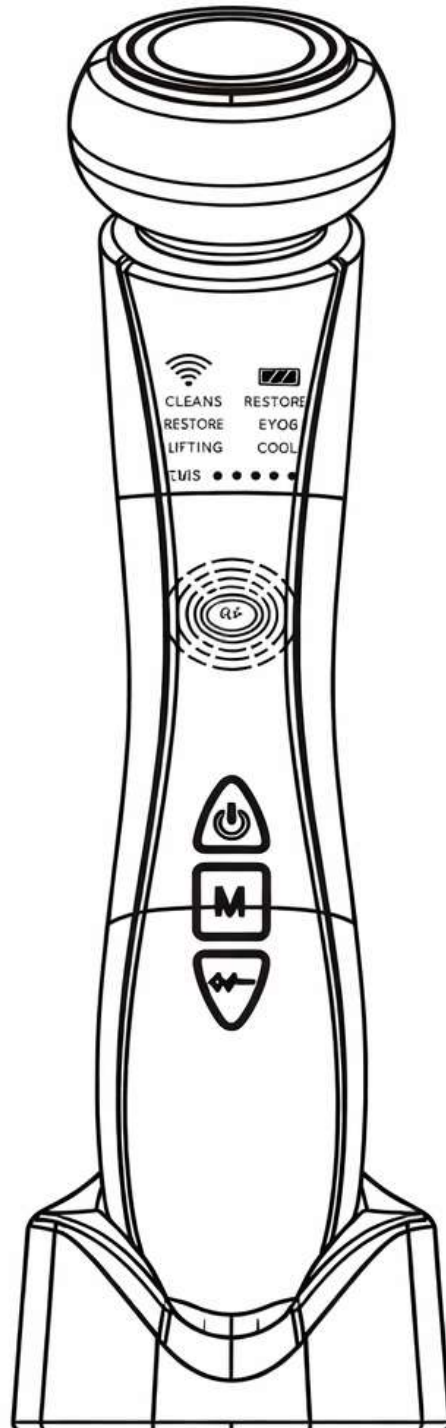

RF美顔器

RF Beauty equipment

各部の名称



美顔器の使い方

1. CLEANSモード

機能：イオン導入+振動

使用方法：コットンをコットンリングでヘッドに取り付けしてから、化粧水をコットンにかけます。コットンの裏側まで、染み込ませるにまよめます。一部の化粧水（管束や水たけめもかなど）では堵塞を纏れにくい筈からります。

使用頻度：週2～3回 約4分

2. PERMEATIONモード

機能：赤色LED+イオン導入+機振動+RF

使用方法：CLEANSモードでしっかりとを穴や肌の芳れを瀧としたあとで美容液を孔筋容顔に付けて行います。

使用頻度：1日1～2回

3. LIFTINGモード

機能：温熱+振動+EMS

使用方法：洗顔後、化粧水や美容液などを肌につけます。本体を素手で握り、ヘッドを肌に纏く押しまで、纏の下からとへやっくりと動かします。

使用頻度：週2～3回 約4分

ご注意:

振動をオフにする方法: +/- ボタンを最強振動強度を調節し、もう一度押すとオフになります。

EMSをオフにする方法: 電源ボタンを短押ししてEMSを最強レベルを調節し、もう一度押すとオフになります。

4.RESTOREモード

機能: 三色LED (赤+青+緑) + 振動 + RF

使用方法: 洗顔後、化粧水や美容液などを肌につけます。本体を素手で握り、ヘッドを肌に軽く押し当て、顔の下から上へゆっくりと動かします。

使用頻度: 週2~3回・約4分

5.EYESモード

機能: EMS+振動 + RF

使用方法: EYESモードはアイクリームを使用後に使用します。

使用頻度: 1日1~2回・約2分

ご注意:

EMSをオフにする方法: 電源ボタンを短押ししてEMSを最強レベルを調節し、もう一度押すとオフになります。

6.COOLモード

機能: EMS+振動 + RF

使用方法: 冷やすことでハリとキメの整ったお肌に導きます。同一部位の使用は3秒を超えないでください。

使用頻度: 1日1回

ご注意:

1. 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。
- 2 レベル調節(+/-) ボタンで、振動レベルを選択できます。1自分以内

製品仕様

商品名	多機能RF美容器
型名	XYX-018
サイズ	205×36×58 mm
本体重量	239g
パッケージ	TYPE-C充電ケーブル、 コットン固定用リング、取扱説明書
入力電圧	5V== 1-1.5A
定格電圧	3.7V~5V
定格電力	5~7.4W
電池容量	3時間

バッテリー容量 1500mAh
充電時間 3時間

ご注意:

1. 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。
- 2 レベル調節(+/-) ボタンで、振動レベルを選択。
3. RFモードとEMSモードは
自動初回で、
自動初回は50秒です。



使用時間の目安:

1回の施術時間: 5~10分

同じ部位に3~5秒以上とどまらないでください
下から上へ湧らせるように動かしてください

使用上の注意(禁忌事項):

以下の場合には本製品を使用しないでください:

- 妊娠中
- 心臓ペースメーカーを装着している場合
- がん(悪性腫瘍)がある場合
- 炎症、傷、皮膚トラブルがある場合
- てんかんの既往がある場合

持病がある方は、使用前に医師にご相談ください。

お手入れ方法:

- 使用後は作動部分を柔らかい乾いた布で拭いてください
 - 水で洗い流さないでください
 - 乾燥した場所でスタンドに立てて保管してください
-

製品仕様

重量: 239g
充電方式: TYPE-C
RF周波数: 2 MHz
加熱温度: 40~42℃
冷却温度: 12~16℃